



SANTE HC.  
Healthcare Alliance International Limited

# 口健乐® 口腔产品系列

24-2-2017



# 口健乐®

口健乐 --- 了解都市人口腔疾病及健康的问题，提供更全面、更贴心、更高效的解决方案，为您及您的家人带来全新的口腔健康新尺度。

高效能专业牙科设备·家用系列

将牙科诊所级的专业疗程及设备，完全地家用化，带到每个人的家中，创新概念的产品令您可轻轻松松在家中享受专业级的口腔洁净、牙齿美白效果。方便、易用、专业、高效，从此由自己掌握控制！



# 口健乐® 电动洗牙器

## 定位

5秒无痛去牙石 首创家用洗牙器

唯一家用电动洗牙器

大学实证 100%有效 · 『零酸痛』5秒清除牙石 · 随时家中自己洗牙

配有独特的高效洁净洗牙啫喱，蕴含『S-Series抛磨牙石洁净粒子』

针对牙齿进行深层清洁，清除牙石，使牙齿回复光泽 平滑 亮白

强化珐琅质，使牙齿持久洁白，预防细菌滋生及牙石积聚

## 现时市场

市场上没有家用洗牙的专业产品

## 总结

唯一家用无痛洗牙产品

可满足忙碌及不能定时到诊所洗牙的人士

满足市场庞大的需求



针对牙缝及难清洁位置 · 100% 深层洁净 · 全面清除牙石

洁净洗牙啫喱成份：Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Disodium Pyrophosphate, Tetrapotassium Pyrophosphate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Alumina, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Methylparaben, Sodium Saccharin, Limonene.

香港销售点:

萬寧 manning's

# 口健乐® 电动洗牙器

口健乐®电动洗牙器配以独特的高效洁净洗牙啫喱，内里蕴含『S-Series 抛磨牙石洁净粒子』，深层清洁，清除牙石。强化珐琅质，预防细菌滋生及牙石积聚，使用一次，便能有效回复牙齿洁净！建议每星期使用1次，保持牙齿洁净。建议最少每2个月更换牙齿洁净软刷头。

使用方法：

1. 放置2枚AAA电池。
2. 每次使用前先刷牙，并确保洁净刷头已牢牢扣紧。
3. 取出适量的『高效洁净洗牙啫喱』于刷头。
4. 手按实”开/关”按钮，并放置于你的牙齿表面进行清洁。
5. 于每个位置清洁几秒时间，不要过份按压刷头；如有需要可补上适量的『高效洁净洗牙啫喱』。
6. 使用后，请以清水漱口。

比利时制造



内含：

- 电动洗牙器
- 高效洁净洗牙啫喱20ml
- 牙齿洁净软刷头
- 2枚AAA碱性电池

# 口健乐® 电动洗牙器补充装

## 口健乐®洁净洗牙啫喱补充装内含

1. 针对牙缝清洁的牙缝洁净软刷，深入牙缝及难刷位置彻底清除牙石
2. 牙齿洁净软刷更换装 (建议最少每2个月更换1次，以确保最佳清洁效果)
3. 高效洁净洗牙啫喱补充装20ml，内里蕴含『S-Series 抛磨牙石洁净粒子』，深层清洁，清除牙石

用于配合口健乐®电动洗牙器，不建议单独使用任何刷头或啫喱。

## 更换刷头方法:

以逆时针方向扭动，取出机身需更换之旧刷头。以顺时针方向扭动，放置新的刷头。每次使用前先刷牙，并确保洁净刷头已牢牢扣紧。

比利时制造



内含:

- 高效洁净洗牙啫喱20ml
- 牙齿洁净软刷头
- 牙缝洁净软刷头

# 口健乐® 5天美白健齿牙套

## 定位

首创加入牙医专业的美白步骤  
补缀珐琅质裂缝 防敏成份 持久美白

首创加入牙医专业的美白步骤  
创新专利配方

**PAP+CCF+MOHA**

去渍、补缀珐琅质裂缝、美白

重建珐琅质，防止敏感情况，  
确保带来持久美白效果，五天  
全齿美白8色阶，有效三个月

健齿同时美白，不伤牙齿或珐  
琅质

单一步骤，简单易用(即弃性)

## 现时市场

市场上牙齿美白需求非常大

市面上产品种类不多，使用  
非常复杂

## 总结

市场存在很大需求，爱美或  
重视社交仪表的人士，产品  
于功效性、简单性、安全性  
都胜过现时的产品。



建议零售价 HK\$379

红牌价 HK\$299

促销价 HK\$269

香港销售点:

萬寧 manning's

成份: Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Sorbitol, Chondrus Crispus Powder, Hydroxyapatite, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Aroma, Citric Acid, Sodium Levulinate, Acrylates/Acrylamide Copolymer, Sodium Anisate, Sodium Fluoride, Paraffinum Liquidum, Xylitol, Monosodium Citrate, Xanthan Gum, PVM/MA Copolymer, Calcium Gluconate, Calcium Lactate, Potassium Acesulfame, Polysorbate 85, C12-15 Pareth-3. Contains Sodium Fluoride (950 ppm F-)

# 口健乐® 5天美白健齿牙套

口健乐®5天美白健齿牙套首创加入牙医专业的美白步骤 —— 补缀珐琅质裂缝，创新配方 **PAP + CCF + MOHA**，帮助重建珐琅质，防止牙齿敏感情况，并确保带来持久的美白效果。健齿同时美白，5天全面牙齿美白8色阶，有效3个月！

**单一步骤专业美白 即弃式牙托 简单易用**

实时使用 无需自行量度调制啫喱

方便即弃式 无需每次清洁牙托

比利时制造

**3专利高效健齿美白成份 20分钟专业防敏亮白**

**PAP** – 去除牙齿表面深色素

**CCF** – 矿化及强化牙齿 回复牙齿亮白

**MOHA Complex**– 重建珐琅质、补缀裂缝

# 口健乐® 5天美白健齿牙套



10 prefilled  
ready-to-use  
trays

每包装内含10个即弃式  
美白牙套(5天疗程)

## 使用方法：

1. 每次使用前先刷牙。
2. 双手擦干后，将口健乐® 5天健齿美白牙套从包装取出，并牢牢放置于牙齿的上下排。
3. 轻轻合实嘴巴就可。别用力咬紧牙套，以免美白啫喱由牙套内流出。切勿咽下啫喱。
4. 20分钟后请取出牙套，以清水漱口及冲掉口腔内之啫喱即可。
5. 建议连续使用5天，以达到最佳健齿美白效果。



# 口健乐® 美白牙膏

## 定位

专利美白成份 去渍、实时亮白!

专利美白成份，畅销欧洲各国!

### Micro crystal whitening

- Patented ingredient PAP brightens teeth and restore natural whiteness

### Stain dissolving technology

- reduce tartar formation which can also lead to discoloured teeth

Active surface whitening complex

## 现时市场

市场上有很多美白牙膏产品，原理多为含有研磨粒子，以带出去渍美白功效

## 总结

利用专利成份，有效去渍美白!



建议零售价 HK\$89

# 口健乐® 牙龈牙膏

## 定位

孕妇牙膏 保护牙龈 强化珐琅质

**3大独特成份 · 为孕妇带来最佳牙齿口腔保护!**

**MOHA** - 重建珐琅质 Rebuilds enamel defects & whitens naturally

**Vitamin E** – 减低炎症及牙龈红肿 reduces gums inflammation, enhances gums immune functions, stimulates blood flow, result in healthy gums; decreases bacterial adhesion

**Tea tree oil** – 天然抗敏消炎 natural antiseptic, reduce bleeding and inflammation

## 现时市场

市场上并没有专为孕妇而设的牙膏

但孕妇群及产后妇女都比普通人更需要细心照顾牙齿口腔的健康

## 总结

**第1支**最适合孕妇及产后妇女使用的专属牙膏

全面呵护、保护牙龈健康，强化珐琅质!



# 口健乐® 美白漱口水

## 定位

美白漱口水 杀菌 强齿 **1秒美白!**

### 独特成份 · 强齿、美白

- PAP专利成份 & blue covarine 美白光学粒子-高效美白 Instant whitening effect with one use
- Hexametaphosphate 磷酸钠清除牙菌膜 – removes & prevents plaque
- Fluoride 氟化物 强化牙齿结构 - remineralizes and strenghtens tooth enamel

预防蛀牙 · 牙石及牙菌膜形成  
Anti-plaque, anti-tartar, anti tooth decay

## 现时市场

市场上漱口水主要功效声称  
为杀灭**99.9%**细菌 · 强化牙龈健康等

没有品牌漱口水能做到实时  
美白的功效

## 总结

**第1支**添加美白成份 ·  
可洁净而又同时即效美白的  
漱口水!

**1秒美白!**



# 健乐® 美白牙刷

## 定位

美白牙刷 每天美白功效2倍化!

### 独特成份·带出洁净美白功效!

1. 蓝色洁净粒子清除牙菌膜Blue micro-polishing particles bristles remove dental bacterial plaque, higher cleaning power
2. 针对牙缝位置深层清洁Works accurately in the interdental space, helping to reduce the risk of decay
3. 圆头刷毛·不伤珐琅质及牙龈Round ended filaments, cleaning thoroughly and properly without scratching the enamel and harming the gum tissue

## 现时市场


市场上手动牙刷全为塑料或尼龙物料刷毛·并不具备有效成份可作美白/深层洁净之功效

只是物理学上的磨擦·从而带出洁净

## 总结

第1支添加美白成份的美白牙刷·每日刷牙同时美白!

大人小朋友都适用

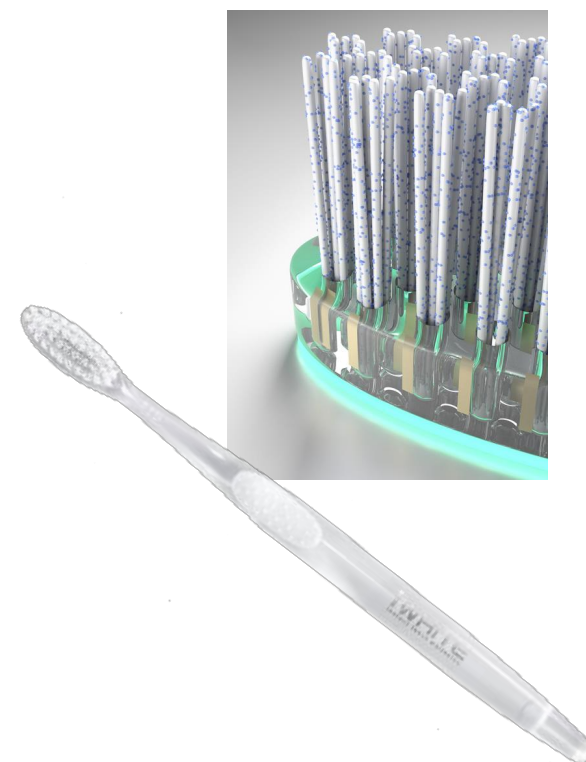

# 口健乐® 美白牙线

## 定位

美白牙线 杀菌去渍 1秒美白!

独特成份，带出洁净美白功效!

1. PAP – 专利成份，高效美白 effective and deep whitening of the teeth, inhibits the growth of bacteria
2. Optical whitener 美白光学粒子，实时见效! (Blue covarine) gives a visibly instant teeth whitening effect

## 现时市场

市场上全为普通尼龙物料牙线，只是有些添加了薄荷，氟，或者加了蜡

只是物理学上的磨擦，从而带出洁净

## 总结

第1盒添加洁净美白成份的美白牙线

针对牙缝位置，杀菌去渍 1秒美白!



## 全方位的宣传活动

大型电视广告@无线电视TVB



# 全方位的宣传活动

**口健樂 iWHITE 專業洗牙**

家用無痛洗牙器

牙石頑漬5秒清除 家用無痛洗牙

體驗價 **\$399** 最後今天！

標準價: \$550

**口健樂 電動洗牙器 牙石頑漬5秒清除**

一試見效

專業牙科設計

利用專業牙科工具之軟膠杯型刷頭，配合獨有的「S-Series拋磨牙石潔淨粒子」啫喱，可極速而大範圍地進行深層清潔，清除頑漬、牙菌膜及牙石，強化珐瑯質，預防細菌滋生。

簡單易用

輕放刷頭於牙齒表面，每顆牙齒清潔時間快至5秒\*，每星期只需使用1次即可保持牙齒潔淨。

安全高效

經大學測試，100%滿意去除牙石頑漬效果，100%零酸腐。

\*因使用者牙齒衛生程度不同，所需時間因人而異。

牙齒美白真正方法

先潔淨牙齒，再全面美白

牙齒加被牙菌膜及牙石覆蓋，會阻礙美白成份吸收，導致美白功效未能完全發揮，所以美白前，需先進行深層洗牙清潔，才可事半功倍，美白效果更持久。

體驗價 **\$279**

標準價: \$379

牙齒加被牙菌膜及牙石覆蓋，會阻礙美白成份吸收，導致美白功效未能完全發揮，所以美白前，需先進行深層洗牙清潔，才可事半功倍，美白效果更持久。

口健樂5天美白牙套 首創「磁場美白科技」，不含致敏漂白劑，牙套可美白牙齒前後，5天全面美白牙齒8色階！

口健樂 iWHITE 專業牙科設備·家用系列

查詢: 3568 3850

口健樂

manning's 萬事: manning's 獨家發售

## 報章及杂志平面廣告

**口健樂 iWHITE 專業牙科設備·家用系列**

牙石頑漬5秒清除 家用無痛洗牙

而家屋企都可以洗牙?!

直擊測試 洗牙神器去牙石牙菌膜

口健樂 iWHITE 家用無痛洗牙器 (標準價\$419/盒)

比利時製造，利用專業牙科工具之軟膠杯型刷頭，配合獨有的「S-Series洗牙啫喱」，經大學測試100%有效，極速而大範圍地全面深層清除牙菌膜及牙石，強化珐瑯質，預防細菌滋生。每星期使用1次保持牙齒潔淨、平滑。

小編試用了於日本藥妝店買的「牙粉」刷牙，試看這個洗牙啫喱是否真的能到清除牙菌膜。發現洗牙後，牙齒菌膜的完全不見了！值得一讚！(紫色=牙齒菌膜位置)

去牙菌膜測試

Before After

■平時刷牙後，仍有很多牙菌膜殘留

■洗牙後，再用測試液，牙齒菌膜的完全不見了！

推薦MUST TRY人士

- 不去診所洗牙人士
- 牙齒生長不齊整，刷牙難潔淨人士
- 前經脫牙人士
- 吸煙人士

使用分步

1. 每星期使用前先刷牙。至把最難刷的「洗牙啫喱」啫喱及噴霧刷頭的表面。
2. 盡量輕放刷頭於牙齒表面，可於洗完2-3秒後，再刷上「洗牙啫喱」。
3. 如有需要，可於洗完2-3秒後，再刷上「洗牙啫喱」。

牙齒「大掃除」新年優惠 僅足\$100!

即日起至2月9日，於萬事購買家用無痛洗牙器一盒，可以抵低優惠價\$199換購5天美白牙套一盒(原價\$299，僅及\$100)！詳情請參閱萬事條款及細則。

查詢: 口健樂 3568 3850

**連<東張西望>都報導?! 洗牙神器 實測報告**

前幾日看到大台的節目都有介紹這個全城熱話的家用無痛洗牙神器，我當然也要湊一分熱鬧，到萬事買了一試，以下分享我的使用報告給各讀者參考！

**牙石10天形成 點等1年先到診所洗牙?**

很多人都好奇為何要用家用洗牙器? 其實日常刷牙是不走牙石的，但原來牙石形成只需10天! 又點可以等一年才到診所洗牙一次呢? 這個洗牙神器就可做到「屋企洗牙」的新習慣，讓你定期清除牙石牙漬，預防積聚! 難怪它會成為全城搶手貨及受到傳媒熱捧!

**洗牙器使用前後對比**

使用前 使用後

牙齒肉邊的牙石「細綫」及牙漬都清走了很多!

**家用無痛洗牙器 隨時「屋企洗牙」**

今次特意犧牲出賣自己牙齒相，親自測試這部口健樂家用無痛洗牙器，發現第1次使用後，洗牙效果已算不錯，感覺到產品的威力，當然本人很樂意以後都KEEP住使用，養成洗牙習慣!

這部洗牙器原理是利用了專業牙科工具之軟膠杯型刷頭，配合獨有的「S-Series拋磨牙石潔淨粒子」啫喱，深層清除牙石牙菌膜，強化珐瑯質，預防細菌滋生。使用時完全沒有痛楚。以後各位都可「屋企洗牙」了!

**健康是福，每星期一集**

探討都市小毛病，健康小常識不可不識! Winnie S.

家園無痛洗牙器 驚喜價 \$399 (萬事獨家發售)

查詢: 口健樂 3568 3850


# 全方位的宣传活动

## 网上社交媒体广告



# 全方位的宣传活动

## 店内陈列配合及推广

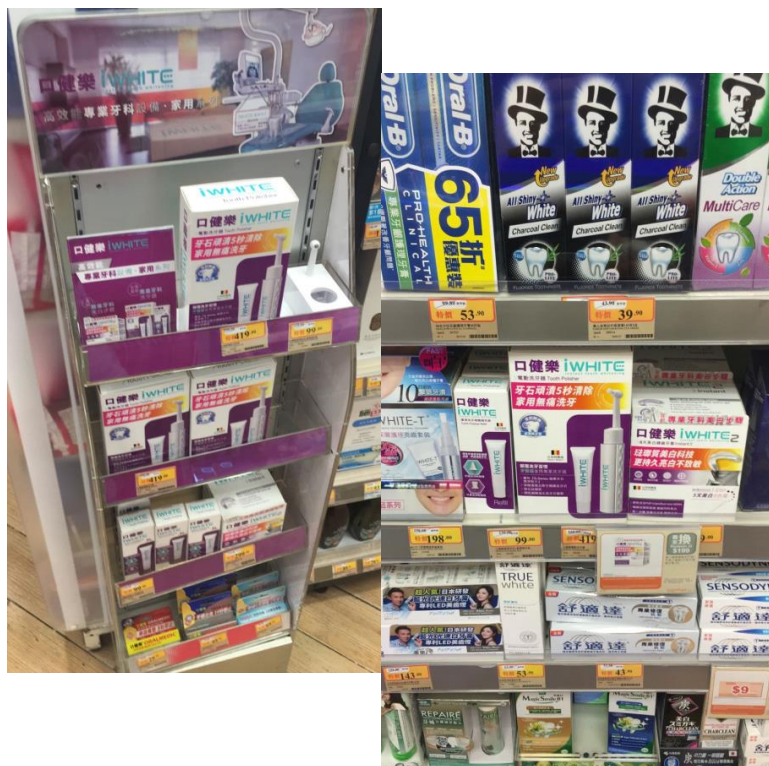

## 街头宣传





THE END